



Contact Us

TEL : (02)2395-7378

FAX : (02)2395-7379

Mon. - Fri. 9:00am - 6:00pm

service@qtmedical.com

線上 Line 客服



QT Cloud

(for training purpose)

使用說明

<https://dashboard.qtmedical.com/login>



Web service version:
V1.15.4 (新加坡)
V1.15.5 (其他地區)



Version: V2-R6

Update Date: 09/13/2022

目錄

QT Cloud 雲端平台

1. 醫療機構註冊	2
1.1 註冊表單	2
1.2 使用條款 (僅限管理員帳號 PCAdmin)	5
2. 啟動帳號與設定	7
2.1 啟動帳號	7
2.2 帳號資訊	8
2.3 密碼	9
2.4 通知設定	12
3. 建立帳號 (僅限管理員帳號 PCAdmin)	13
3.1 建立醫師帳號	13
3.2 建立技術師帳號	16
4. 心電圖記錄	18
4.1 總覽	18
5. 心電圖摘要瀏覽	20
5.1 調整量測值 (僅限 Physician Account 醫師帳號)	20
5.2 調整時間區隔 (僅限 Physician Account 醫師帳號)	22
5.3 心電圖診斷 (僅限 Physician Account 醫師帳號)	24
6. 病患管理	26
6.1 總覽	26
7. 分配心電圖	29
7.1 心電圖病患歸檔	29

客服資訊

31

QT Cloud 雲端平台

本手冊為專供專業醫護人員閱讀與參考之教育訓練手冊，使用詳情仍需以食藥署官網資料庫之正式使用說明書內容為主

1. 醫療機構註冊

1.1. 註冊表單


在使用 QT ECG 雲端平台之前，您需要進行一次性的設定。請準備好有藍牙功能的行動裝置，並跟著以下的步驟進行：

請使用 **Google Chrome** 瀏覽器打開以下網址進入 QT Medical 的管理介面。

<https://dashboard.qtmedical.com/login>

(目前後台系統僅支援 "**Google Chrome**" 瀏覽器)


然後選擇右上角的 "**Activate**" 來啟動。

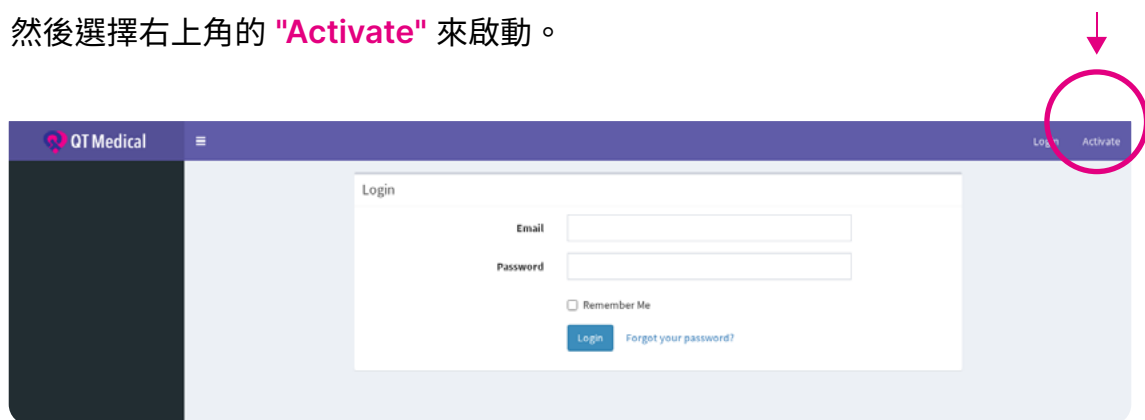


填入表單上的資訊，您也會在此同時建立一個醫師帳號 (Physician Account)，填入您的醫事人員代碼。在填寫完資料後，點選 "**Submit**" 送出資訊。

A screenshot of the QT Medical Organization Activation form. The form is titled 'Organization Activation' and has a dark purple header with the QT Medical logo and 'Login' and 'Activate' links. The form contains several sections: 'Fields marked with an asterisk (*) are required.', 'PCA 500 Recorder Serial Number (How to Identify?)', 'Organization Name', 'Facility Registration Number', 'Country' (a dropdown menu with 'Australia' selected), 'Address', 'Phone Number', 'Admin Account Information' (which includes fields for 'Email Address', 'First Name', 'Middle Initial', and 'Last Name'), and 'Fill in Your Physician Registration Number To Grant Physician Permission.'. The 'Admin Account Information' section is circled in pink. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'I have read and accepted the Terms of Service and Privacy Policy.' and a pink arrow points to the 'Submit' button next to it. A 'Reset' button is located at the bottom right.

在送出註冊資料後，您需要認證您的 **email 信箱**，請跟著以下的畫面指示依步驟進行。

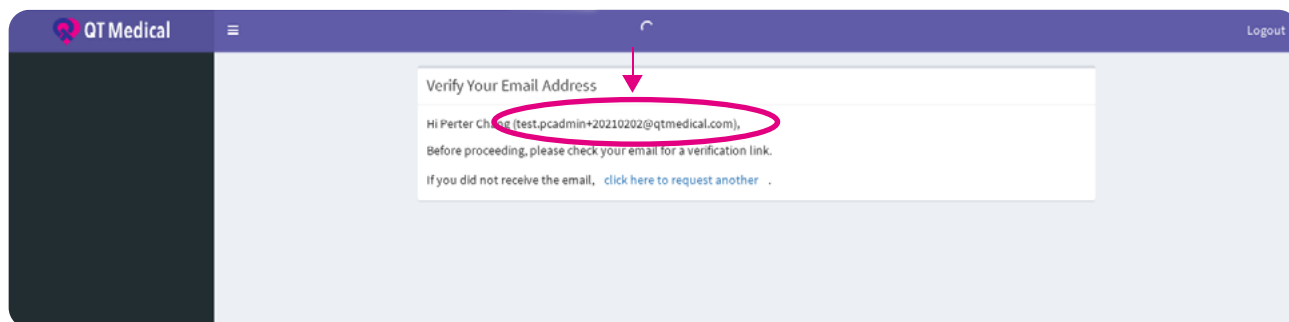



檢查您的信箱，您會收到管理者密碼的信件，(請同步檢查您的垃圾信件夾)。點擊 **Verify Email Address** 來驗證您 email:

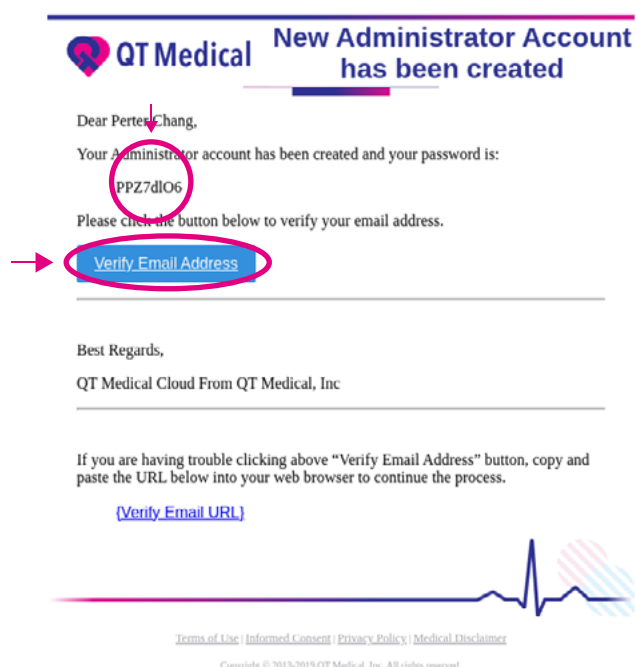

如果您點擊 **Verify Email Address** 按鈕遇到問題，請 複製郵件中的網址然後貼到瀏覽器的網址列前往，繼續完成驗證步驟。




在成功完成驗證後，登入您的帳號。

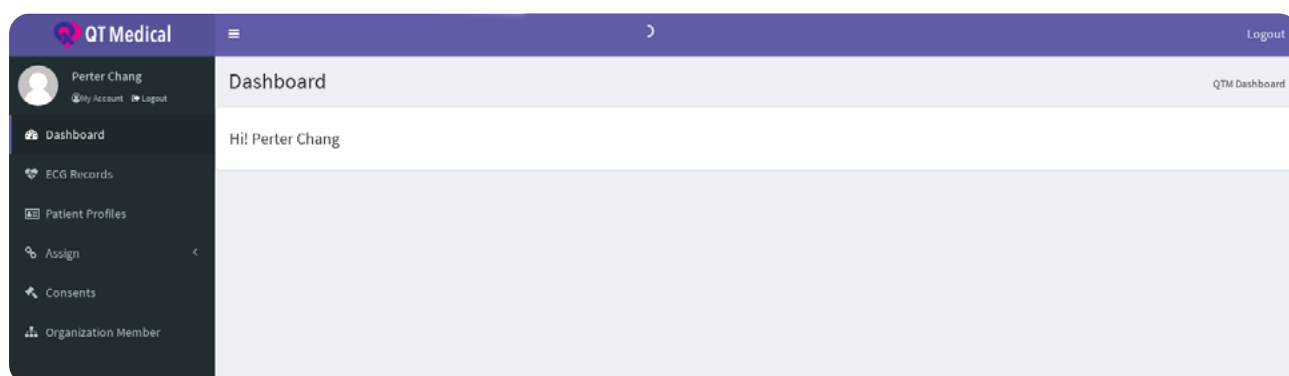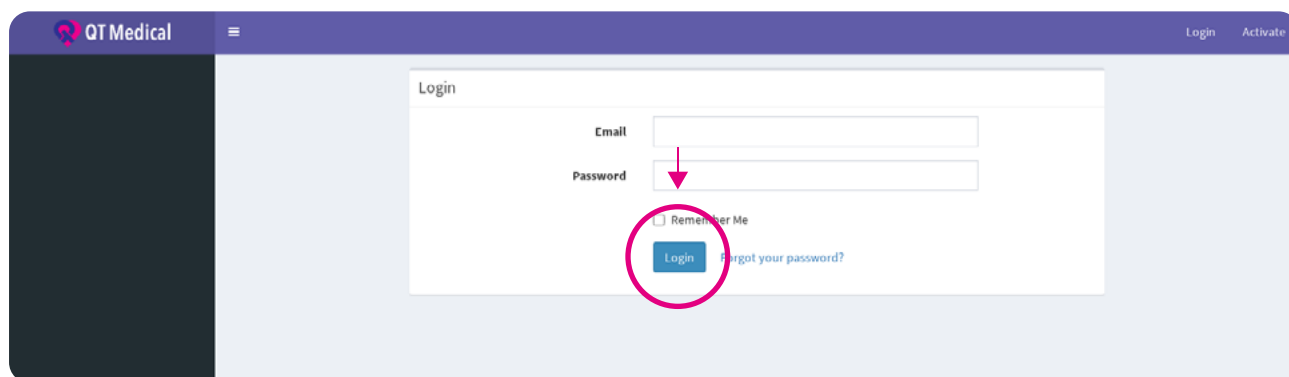


1.2. 使用條款 PAdmin Account ONLY 僅限管理員帳號

當您第一次登入帳號時，您需要先同意我們的使用條款。


點選標籤以閱讀 **Terms of Use** 使用條款。

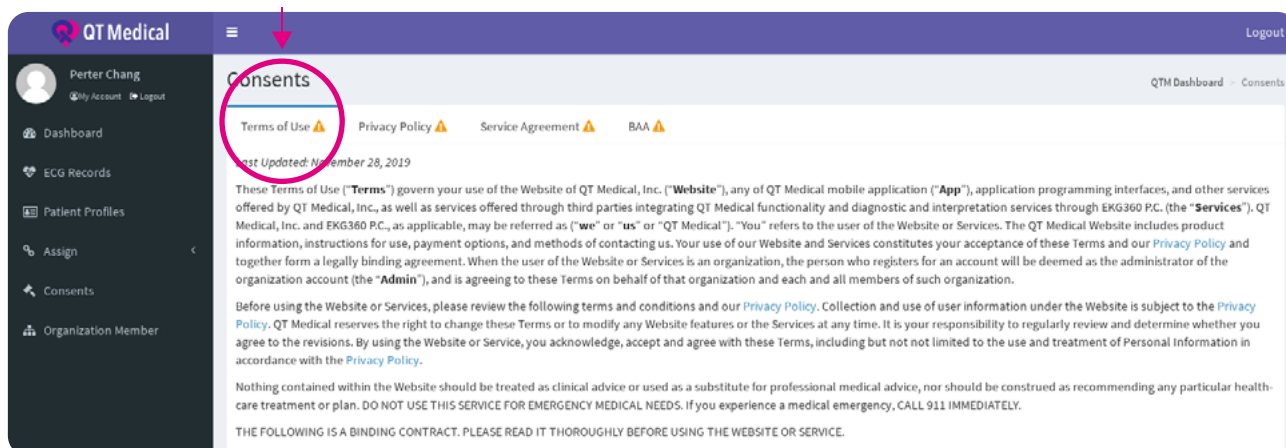

當閱讀完使用條款時，點擊下方的 **Agree** 同意。

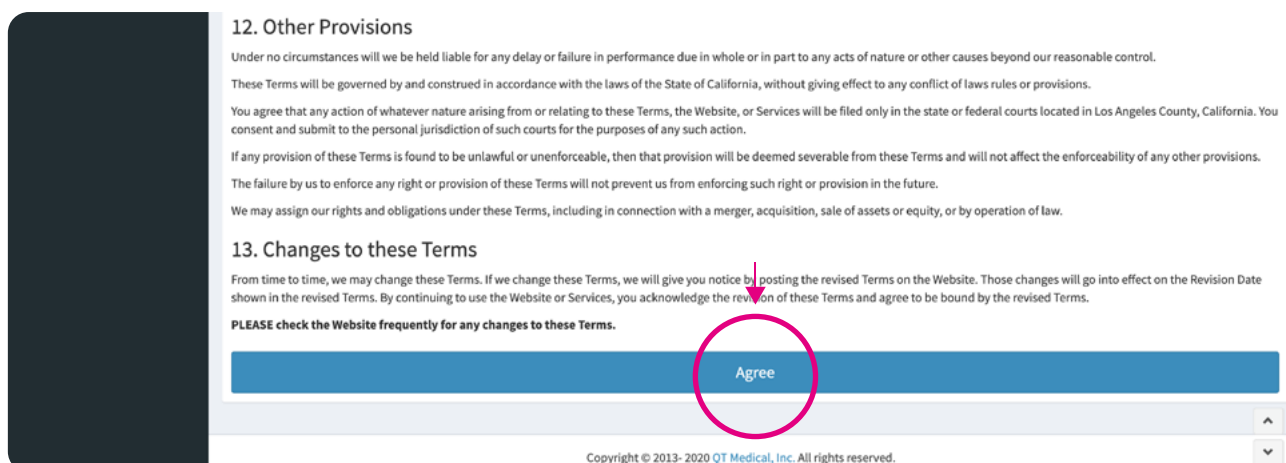

點選標籤閱讀 **Privacy Policy** 隱私權條款。

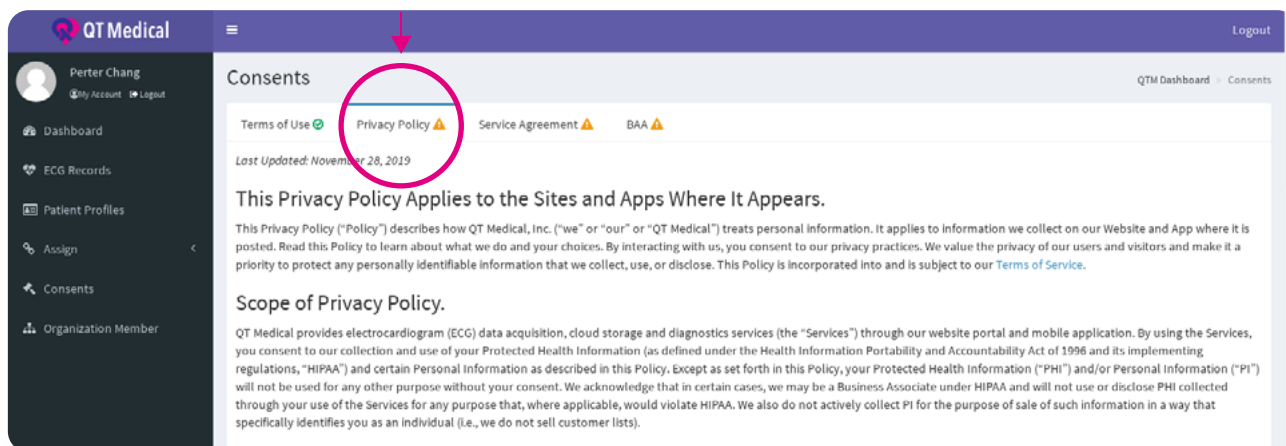

當閱讀完隱私權條款時，點擊下方的 **Agree** 同意。

You Can Contact Us About This Policy and Your Information.

If you have any questions about this Privacy Policy or our data practices, please email us at privacy@qtmedical.com. You can also write or call us at:

QT Medical, Inc.
Attn: Brett Chien, PhD
1360 Valley Vista Dr., Suite 203, Diamond Bar, CA 91765
(909)323-0007

We will not take action against you for filing a complaint. If you have a complaint concerning our compliance with applicable privacy laws, we will investigate your complaint and take appropriate measures. You may also file a complaint relating to our use and disclosure of your PHI to the United States Department of Health and Human Services Office for Civil Rights at <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf>.

We May Update This Policy.

This Policy may be updated from time to time without further notice to you and this will be reflected by a "Last modified" date above. Please revisit this webpage regularly for any changes. By continuing to use the Services, you are consenting to the terms of the then-current Policy.

Agree

Copyright © 2013- 2020 QT Medical, Inc. All rights reserved.

當所有的使用條款皆完成同意時，您在成功登入後可以看到條款的摘要。

QT Medical Logout

Perter Chang
My Account Logout

Dashboard
ECG Records
Patient Profiles
Assign
Consents
Organization Member

Consents QTM Dashboard > Consents

Terms of Use Privacy Policy Service Agreement BAA

Last Updated: November 28, 2019

These Terms of Use ("Terms") govern your use of the Website of QT Medical, Inc. ("Website"), any of QT Medical mobile application ("App"), application programming interfaces, and other services offered by QT Medical, Inc., as well as services offered through third parties integrating QT Medical functionality and diagnostic and interpretation services through EKG360 P.C. (the "Services"). QT Medical, Inc. and EKG360 P.C., as applicable, may be referred as ("we" or "us" or "QT Medical"). "You" refers to the user of the Website or Services. The QT Medical Website includes product information, instructions for use, payment options, and methods of contacting us. Your use of our Website and Services constitutes your acceptance of these Terms and our Privacy Policy and together form a legally binding agreement. When the user of the Website or Services is an organization, the person who registers for an account will be deemed as the administrator of the organization account (the "Admin"), and is agreeing to these Terms on behalf of that organization and each and all members of such organization.

Before using the Website or Services, please review the following terms and conditions and our Privacy Policy. Collection and use of user information under the Website is subject to the Privacy Policy. QT Medical reserves the right to change these Terms or to modify any Website features or the Services at any time. It is your responsibility to regularly review and determine whether you agree to the revisions. By using the Website or Service, you acknowledge, accept and agree with these Terms, including but not limited to the use and treatment of Personal Information in accordance with the Privacy Policy.

Nothing contained within the Website should be treated as clinical advice or used as a substitute for professional medical advice, nor should be construed as recommending any particular health-care treatment or plan. DO NOT USE THIS SERVICE FOR EMERGENCY MEDICAL NEEDS. If you experience a medical emergency, CALL 911 IMMEDIATELY.

THE FOLLOWING IS A BINDING CONTRACT. PLEASE READ IT THOROUGHLY BEFORE USING THE WEBSITE OR SERVICE.

QT Medical Logout

Perter Chang
My Account Logout

Dashboard
ECG Records
Patient Profiles
Assign
Consents


Dashboard QTM Dashboard

Hi! Perter Chang


2. 啟動帳號與設定

2.1. 啟動帳號

檢查信件，您會收到密碼。點選 **Verify Email Address** 來驗證您的 email:

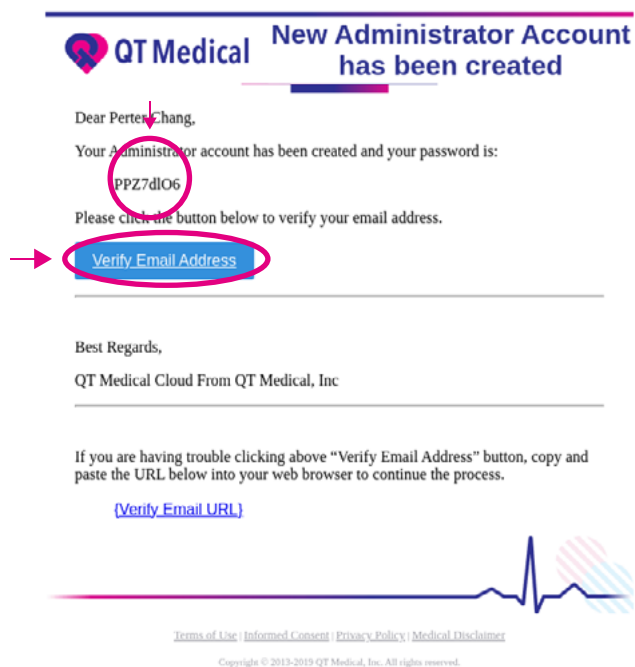


在驗證成功後，重新登入帳號。

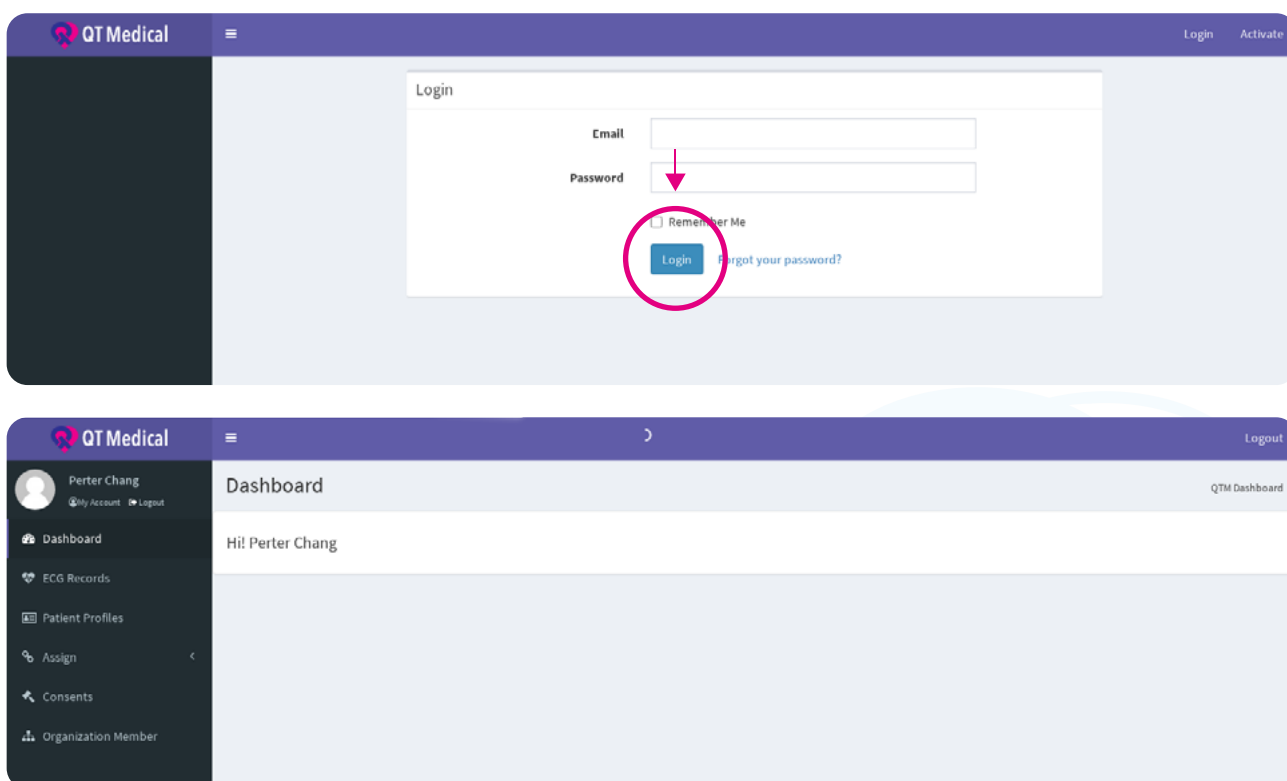

2.2. 帳號資訊


2.2.1 更新帳號訊息

點選 **My account** 我的帳號。

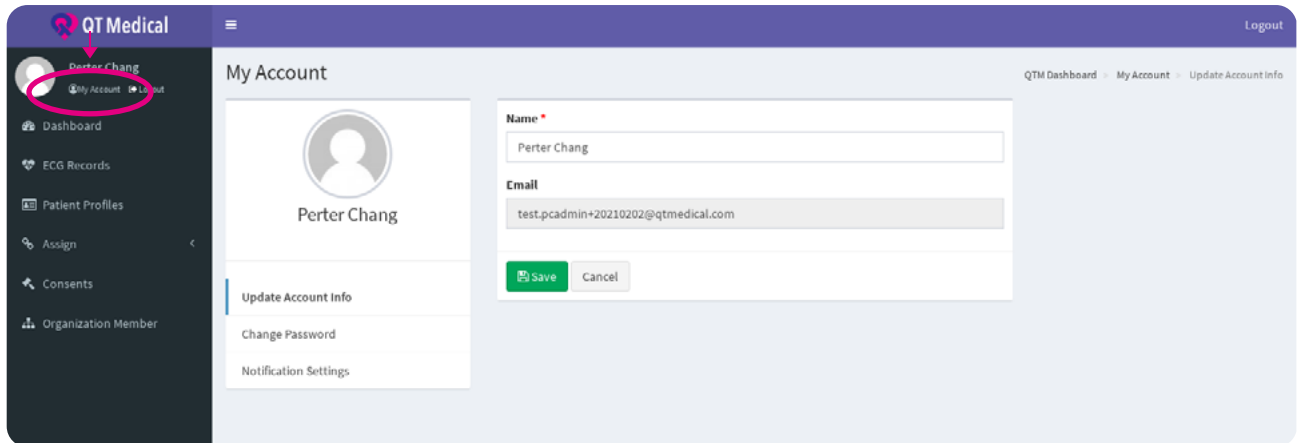

如要更改帳號資訊，請點選 **Update Account Info**(更新帳號資訊)。


編輯您的帳號，完成後請點擊 Save 按鈕存檔。您會看到 **Success** 更新成功的跳出通知視窗。

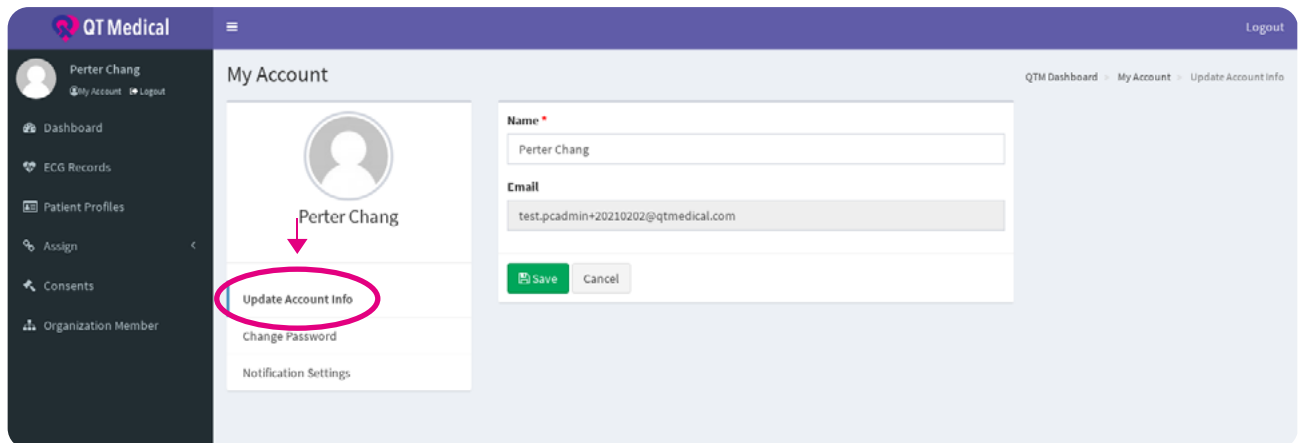


2.3. 密碼

2.3.1 忘記密碼


點擊 **Forgot your Password? 忘記密碼**。

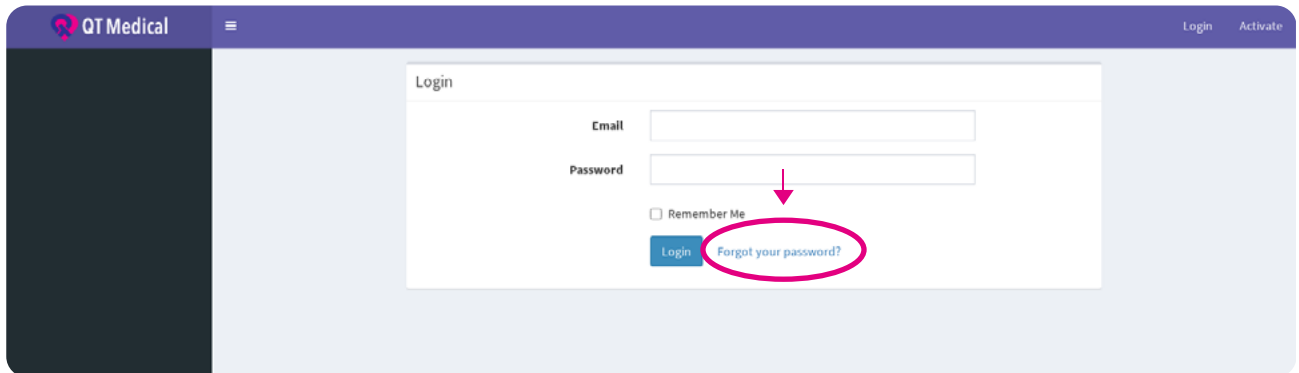


輸入您的 email 並點選 **Reset Password 密碼重置**

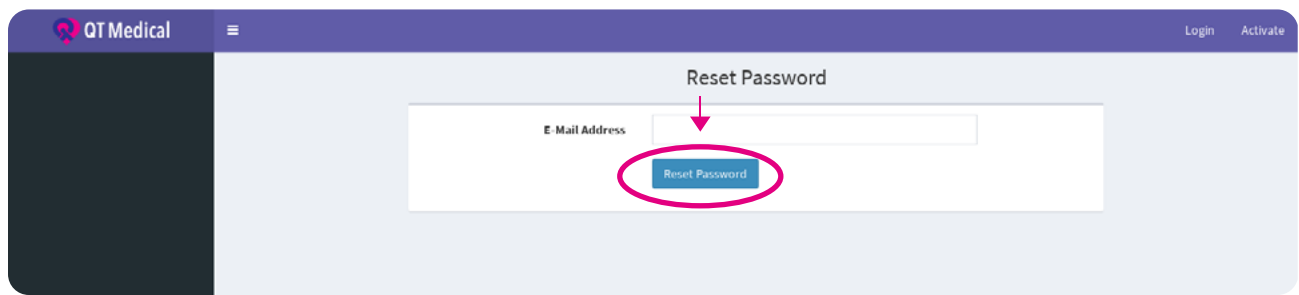

檢查您的 email，您會收到 **密碼重置通知 reset password notification**。

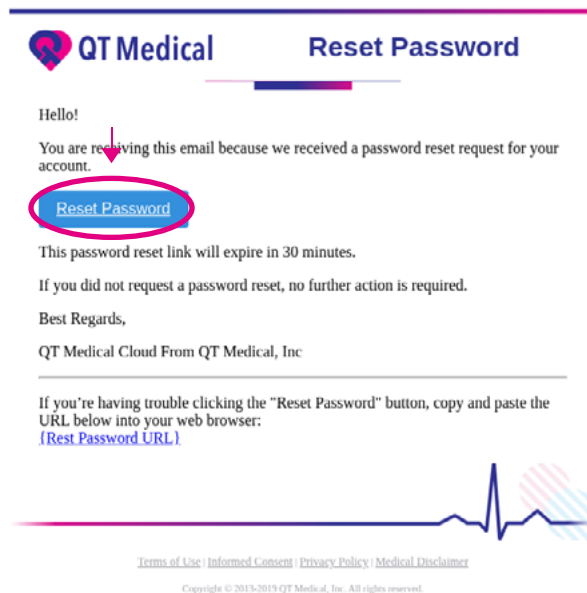

輸入您的 email 與新密碼，然後點 **Reset Password** 來重置密碼。
您會看到 **Success** 更新成功的跳出通知視窗。

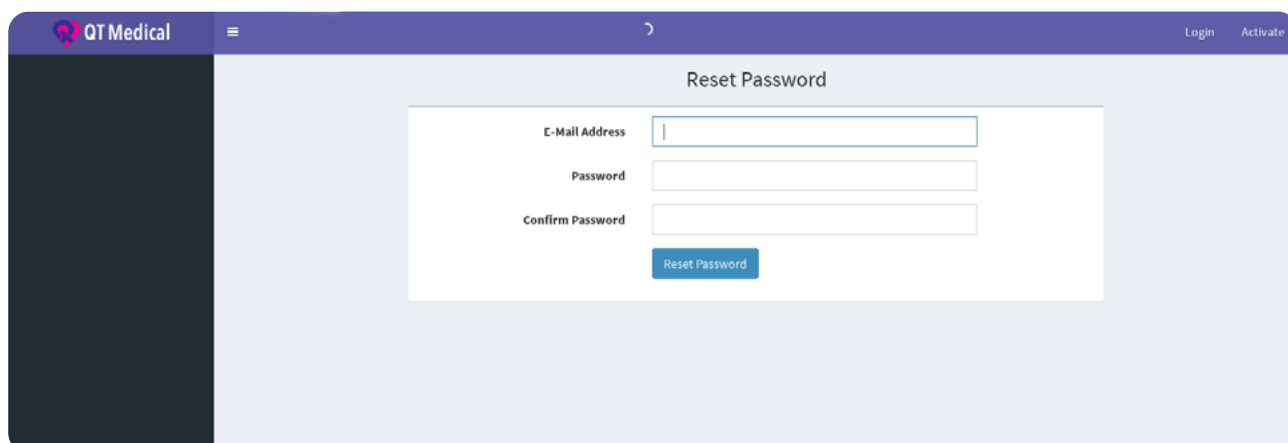

The screenshot shows a web application interface for "QT Medical". The header is dark blue with the logo on the left and "Login" and "Activate" links on the right. A dark blue sidebar is on the left. The main content area is light blue and contains a white "Reset Password" form. The form has three input fields: "E-Mail Address", "Password", and "Confirm Password". Below the fields is a blue "Reset Password" button.

QT Medical

Reset Password

E-Mail Address

Password

Confirm Password

Reset Password



2.3.2 密碼變更

點選 **Change Password** 密碼變更來設定您的新密碼。

The screenshot shows the 'My Account' page for a user named Jon Snow. On the left sidebar, the 'Change Password' option is circled in pink. The main content area displays the 'Change Password' form with three input fields: 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm Password'. Below these fields is a green 'Change Password' button and a grey 'Cancel' button. The breadcrumb trail at the top right reads 'QTM Dashboard > My Account > Change Password'.


輸入您的新密碼，然後點 **Change Password** 完成變更。

This screenshot shows the same 'My Account' page, but now the 'Change Password' button in the main content area is circled in pink. The breadcrumb trail at the top right reads 'QTM Dashboard > My Account > Change Password'.




2.4. 通知設定

點擊 **Notification Settings** 通知設定，然後您可選擇以下選項
Physician Account ONLY (僅限醫師帳戶)：當 ECG 上傳時立即收到通知

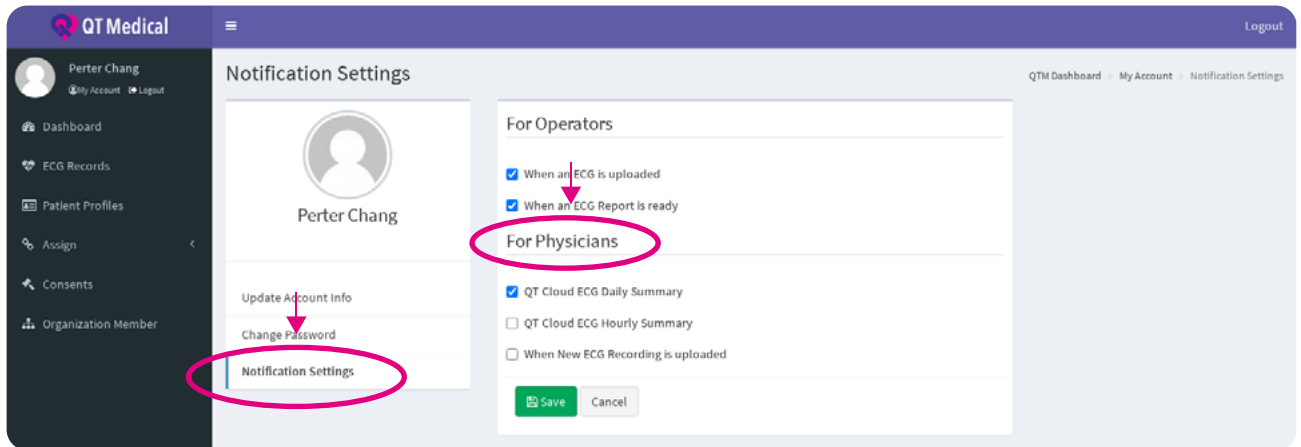

您將會收到通知。

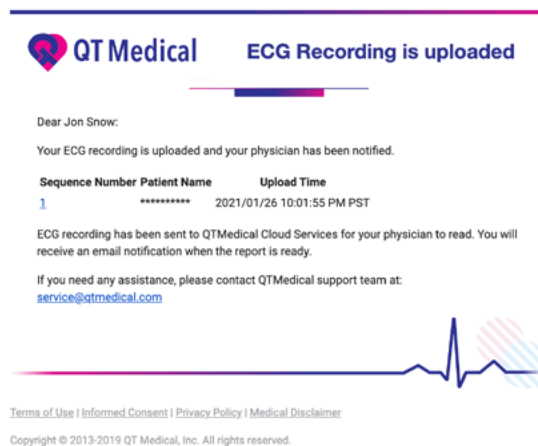


3. 建立帳號

PCAdmin Account ONLY 僅限管理員帳號

3.1 建立醫師帳號


請選擇 **Organization Member 機構成員** 為您的機構建立與編輯帳號。

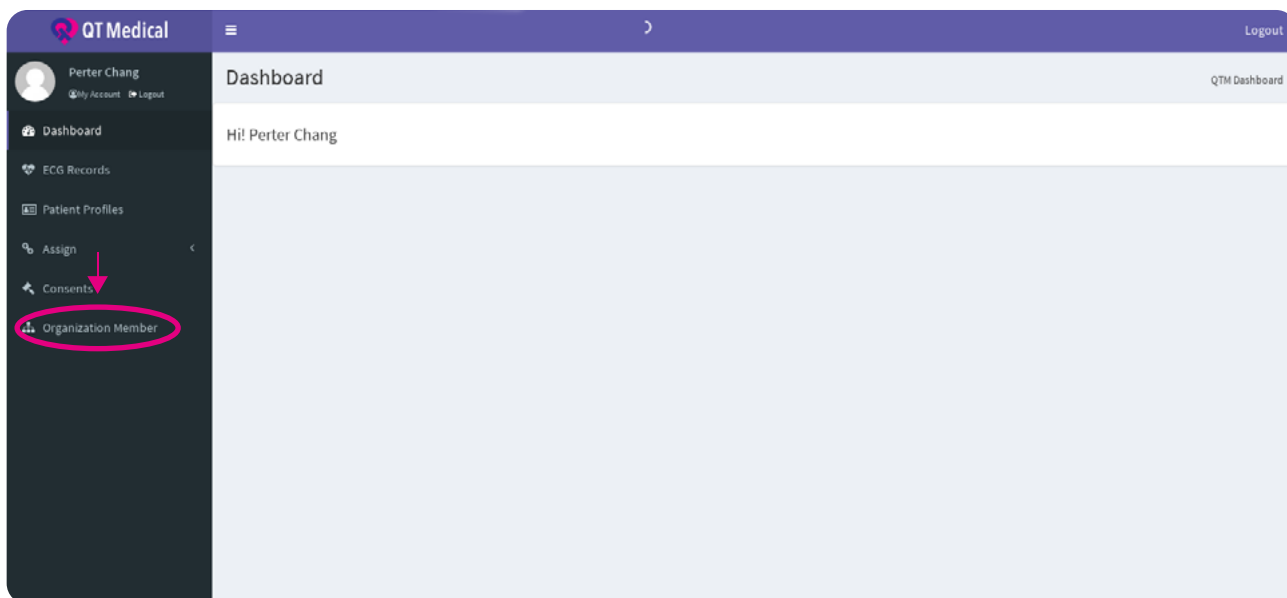

填寫資料後，您可以建立 Physician 醫師或 Operator 技術師 兩種類型的帳號，並在完成填寫後選擇 **Submit 送出**。


A screenshot of the 'Organization Member' form in the QT Medical system. The form is divided into two main sections: 'New Physician Account' and 'New Operator Account'. Both sections have a 'Quota Usage' indicator (3/100 for Physician, 5/100 for Operator). Each section contains fields for First Name, Middle Init, Last Name, and Email Address, with a note that fields marked with an asterisk (*) are required. Below these fields are 'Submit' and 'Reset' buttons. In the 'New Physician Account' section, the 'Submit' button is circled in red, with a red arrow pointing to it and the text '建立新的醫師帳號' (Create new physician account). In the 'New Operator Account' section, the 'Submit' button is also circled in red, with a red arrow pointing to it and the text '建立新的技術師帳號' (Create new technician account). Below these sections are lists for existing 'Physician Account (1/100)' and 'Operator Account (1/100)'.

送出註冊資料後，訊息將顯示在下方，通知電子郵件的擁有者驗證 email 並按照畫面上的說明步驟進行操作。

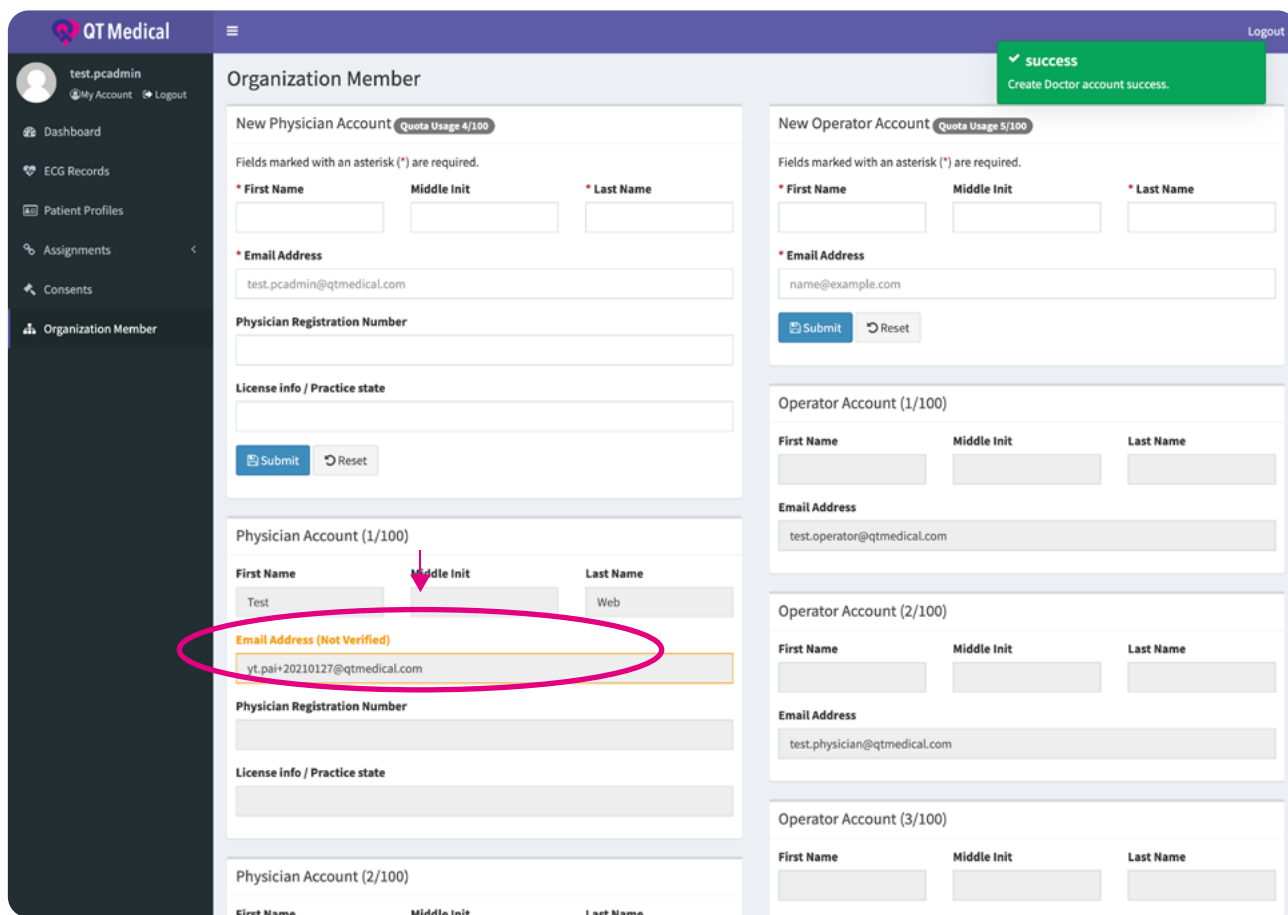


檢查醫師的 email 信箱，來獲得醫師帳號密碼（請同時檢查「垃圾信件夾」）。點擊 Verify Email Address 來驗證 email 信箱：


Your password

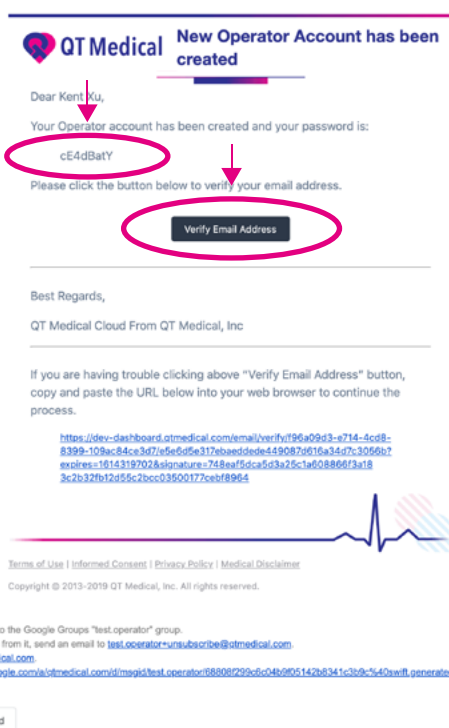

如果您點擊 **Verify Email Address** 按鈕遇到問題，請複製郵件中的網址然後貼到瀏覽器的網址列前往，繼續完成驗證步驟。

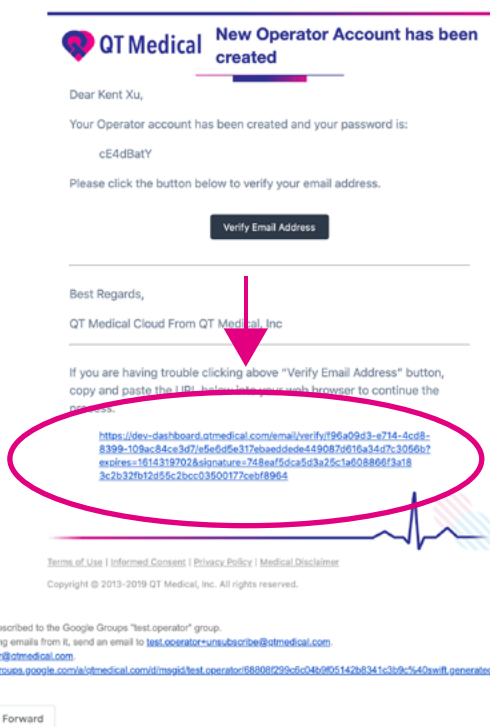

驗證 email 後，您將會看到摘要畫面。

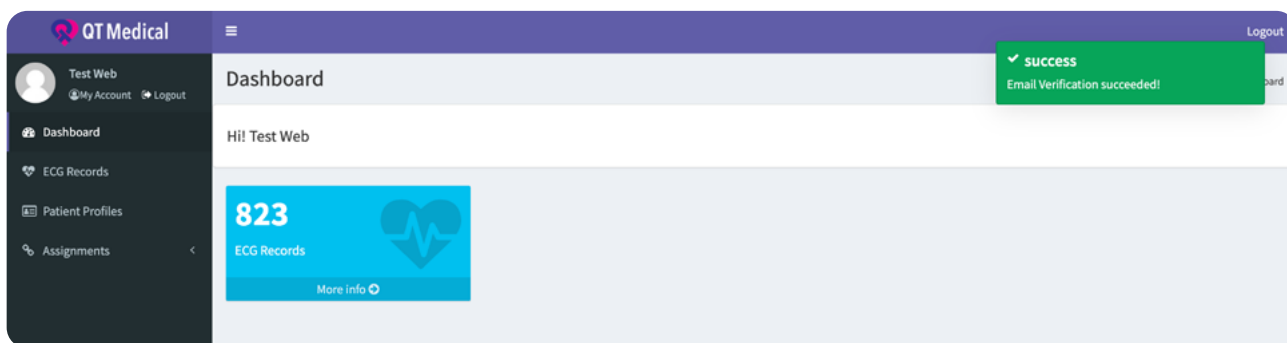

3.2 建立技術師帳號


您可以建立兩種類型的帳號，填寫資料並在完成填寫後點選 **Submit** 送出。

The screenshot shows the 'Organization Member' page in the QT Medical system. It features two main forms: 'New Physician Account' and 'New Operator Account'. Both forms have fields for First Name, Middle Init, Last Name, and Email Address. The 'New Physician Account' form also includes a 'Physician Registration Number' field and a 'License info / Practice state' field. The 'New Operator Account' form includes an 'Operator Account (1/100)' section with fields for First Name, Middle Init, Last Name, and Email Address. The 'Submit' button on the 'New Physician Account' form is circled in pink with a red arrow pointing to it, and the text '建立新的醫師帳號' (Create new physician account) is written next to it. The 'Submit' button on the 'New Operator Account' form is also circled in pink with a red arrow pointing to it, and the text '建立新的技術師帳號' (Create new technician account) is written next to it.


送出資料後，訊息將顯示在下方，通知電子郵件的擁有者驗證 email 並按照畫面上的說明步驟進行操作。

The screenshot shows the 'Organization Member' page in the QT Medical system after the 'New Operator Account' form has been submitted. A green success message 'success Create Operator account success.' is displayed at the top right. The 'New Operator Account' form is now filled out with the following data: First Name: name, Middle Init: , Last Name: , Email Address: name@example.com. Below this, the 'Operator Account (2/100)' section is shown with the following data: First Name: Kent, Middle Init: Xu, Last Name: Xu. The 'Email Address (Not Verified)' field in the 'Operator Account (2/100)' section is circled in pink with a red arrow pointing to it, and the text '建立新的技術師帳號' (Create new technician account) is written next to it. The 'Email Address' field in the 'Operator Account (2/100)' section is also circled in pink with a red arrow pointing to it.


檢查醫師的 email 信箱，來獲得醫師帳號密碼（請同時檢查「垃圾信件夾」）。點擊 Verify Email Address 來驗證 email 信箱：

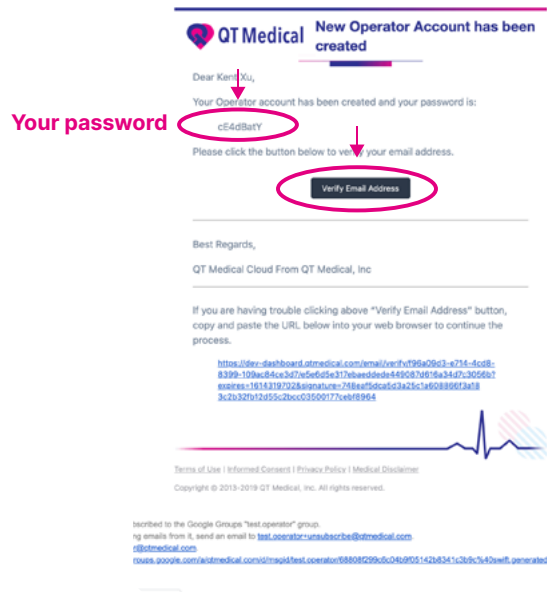

如果您點擊 **Verify Email Address** 按鈕遇到問題，請複製郵件中的網址然後貼到瀏覽器的網址列前往，繼續完成驗證步驟。

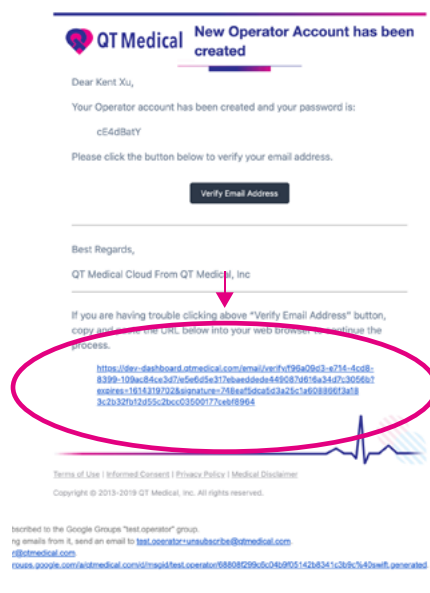


驗證 email 後，您將會看到摘要畫面。

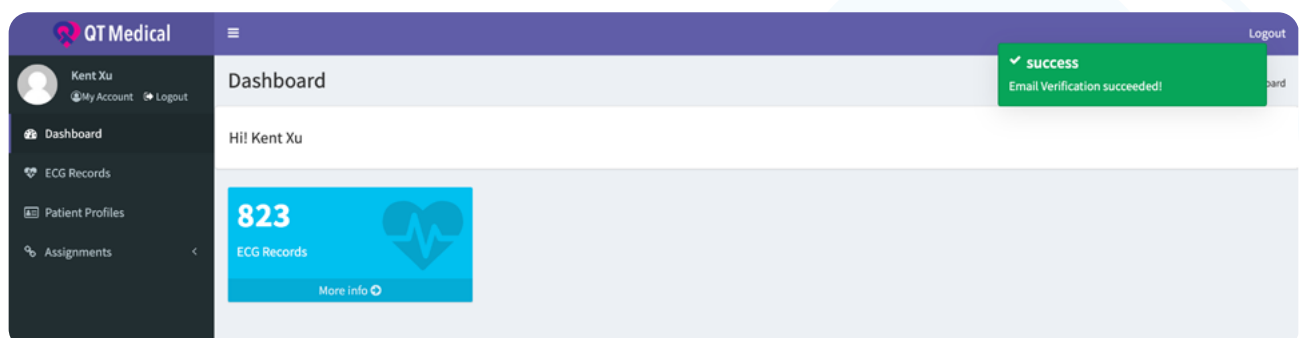


4. 心電圖記錄

4.1 總覽

4.1.1 選擇 **ECG Records** 心電圖記錄標籤，您可以從後台查看所有上傳的心電圖記錄。

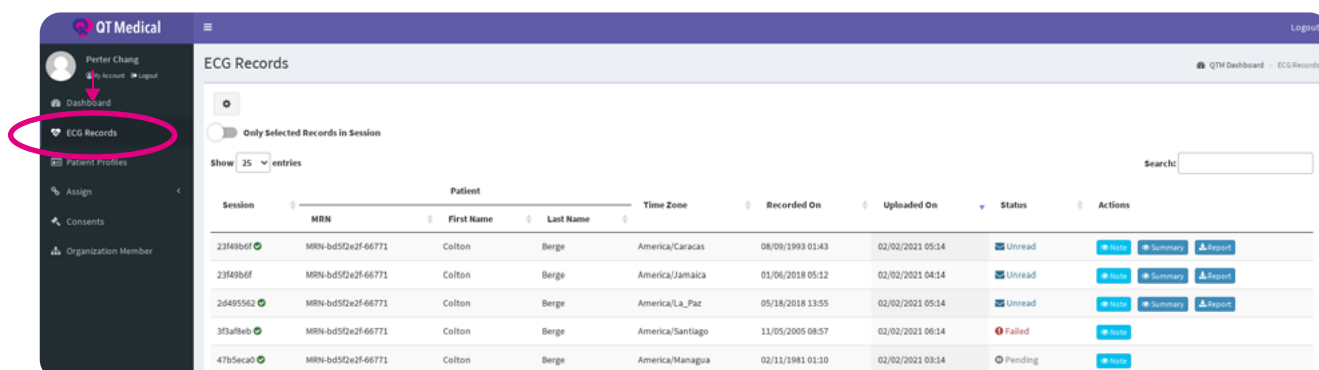


在同個工作階段中錄製的心電圖記錄將被群組，如下所示。

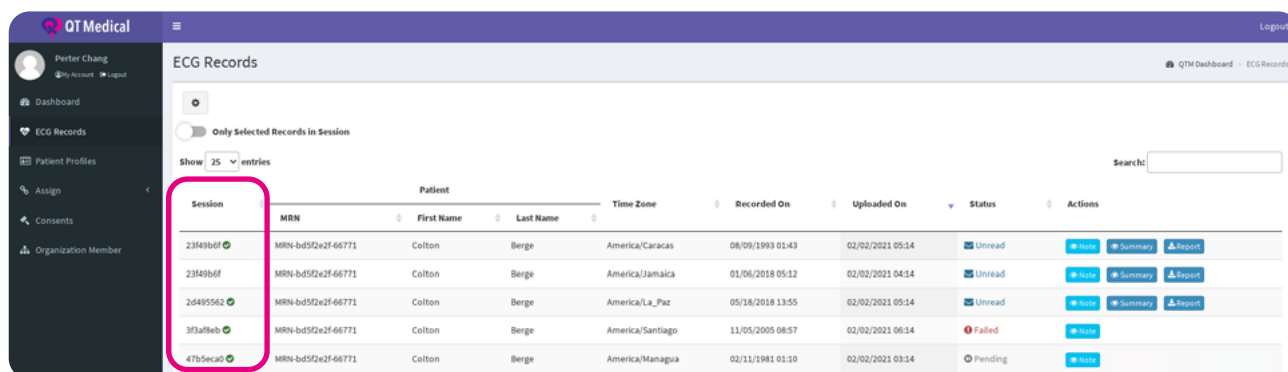

4.1.2 報告狀態

- **Unread**: 報告尚未診斷
- **Finalized** 報告診斷已完成。
- **Failed**: 如果狀態顯示為 Failed 失敗，請聯繫客服。

<https://www.qtmedical.com/zh-tw/contact-us>

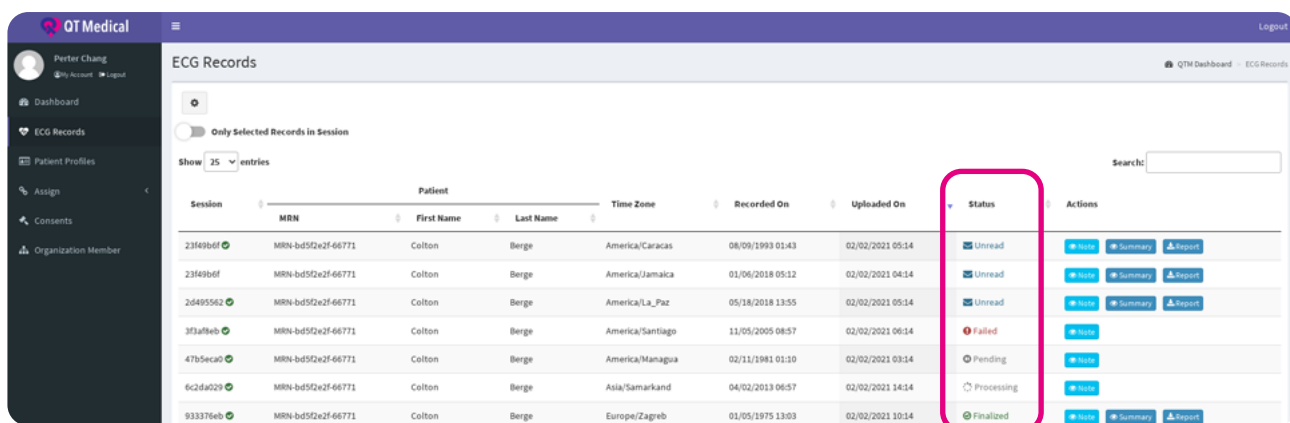

4.1.3 您可以使用 **Search** 搜尋，然後打開 “Only Selected Records” 選項，只顯示您選定的心電圖紀錄。

QT Medical

Perter Chang

Dashboard

ECG Records

Patient Profiles

Assign

Consents

Organization Member

ECG Records

Only Selected Records in Session **Selected**

Show 25 entries

Search

Session	MRN	Patient	Time Zone	Recorded On	Uploaded On	Status	Actions
		First Name	Last Name				
23f49b6f	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Caracas	08/09/1993 01:43	02/02/2021 05:14	Unread Note Summary Report
2d495562	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/La_Paz	05/18/2018 13:55	02/02/2021 05:14	Unread Note Summary Report
3f3a9beb	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Santiago	11/05/2005 08:57	02/02/2021 06:14	Failed Note
47b5eca0	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Managua	02/11/1981 01:30	02/02/2021 03:14	Pending Note
6c2da029	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	Asia/Samarkand	04/02/2013 06:57	02/02/2021 14:14	Processing Note

4.1.4 點選 **Note** (附註)，在彈出視窗口中查看附註。

QT Medical

Perter Chang

Dashboard

ECG Records

Patient Profiles

Assign

Consents

Organization Member

ECG Records

Only Selected Records in Session

Show 25 entries

Search

Session	MRN	Patient	Time Zone	Recorded On	Uploaded On	Status	Actions
		First Name	Last Name				
23f49b6f	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Caracas	08/09/1993 01:43	02/02/2021 05:14	Unread Note Summary Report
2d495562	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/La_Paz	05/18/2018 13:55	02/02/2021 05:14	Unread Note Summary Report
3f3a9beb	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Santiago	11/05/2005 08:57	02/02/2021 06:14	Failed Note
47b5eca0	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Managua	02/11/1981 01:30	02/02/2021 03:14	Pending Note
6c2da029	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	Asia/Samarkand	04/02/2013 06:57	02/02/2021 14:14	Processing Note

QT Medical

Perter Chang

Dashboard

ECG Records

Patient Profiles

Assign

Consents

Organization Member

ECG Records

Only Selected Records in Session

Show 25 entries

Search

Note for ECG ID: a78aa272-695f-4b46-92c0-2e88486a332f


This is the correct record.

Session	MRN	Patient	Time Zone	Recorded On	Uploaded On	Status	Actions
		First Name	Last Name				
23f49b6f	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Caracas	08/09/1993 01:43	02/02/2021 05:14	Unread Note Summary Report
2d495562	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/La_Paz	05/18/2018 13:55	02/02/2021 05:14	Unread Note Summary Report
3f3a9beb	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Santiago	11/05/2005 08:57	02/02/2021 06:14	Failed Note
47b5eca0	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	America/Managua	02/11/1981 01:30	02/02/2021 03:14	Pending Note
6c2da029	MRN-bd5f2e2f-66771	Colton	Berge	Asia/Samarkand	04/02/2013 06:57	02/02/2021 14:14	Processing Note



5. 心電圖摘要瀏覽

5.1 調整量測值 (僅限 Physician Account 醫師帳號)


5.1.1 點擊 **ECG Records**，您可以從後台上查看所有上傳的心電圖記錄。

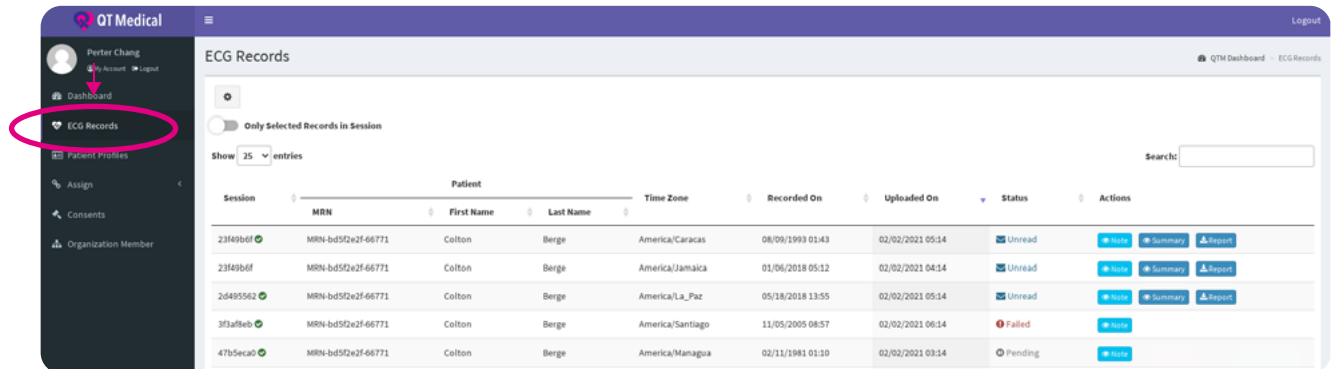


點選 **Summary**，您可以看到摘要瀏覽。

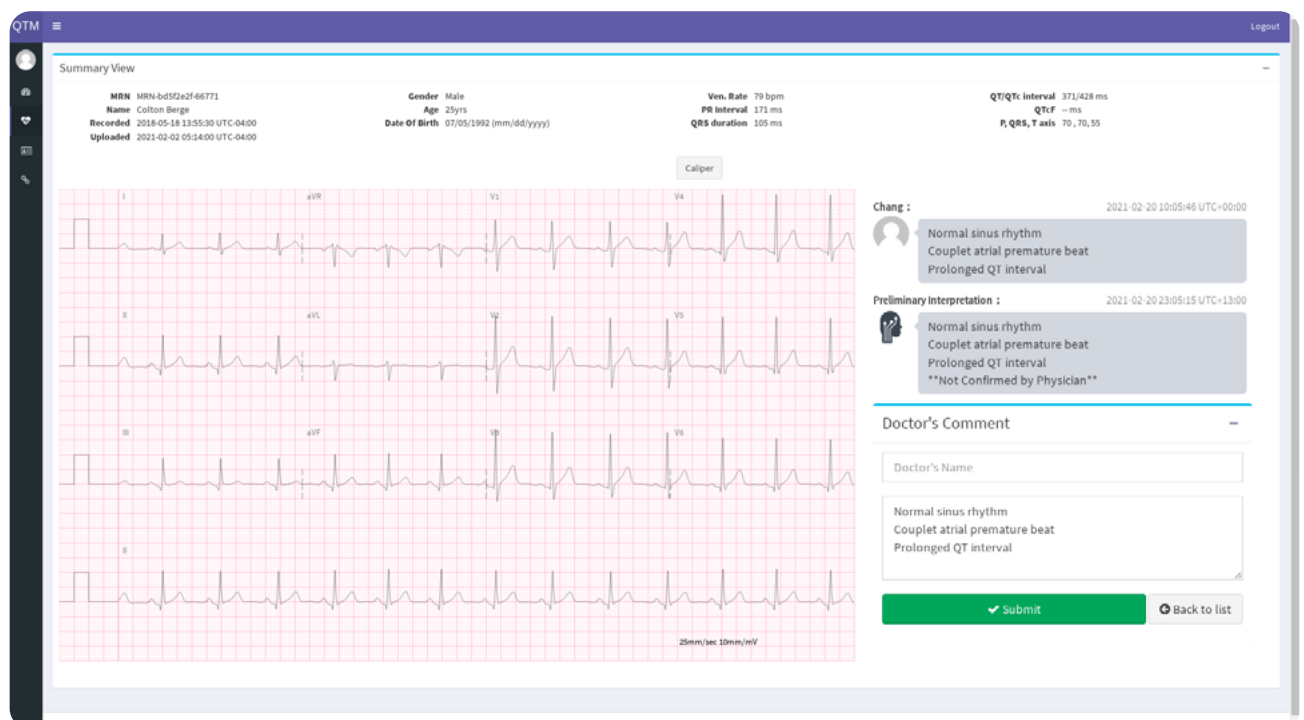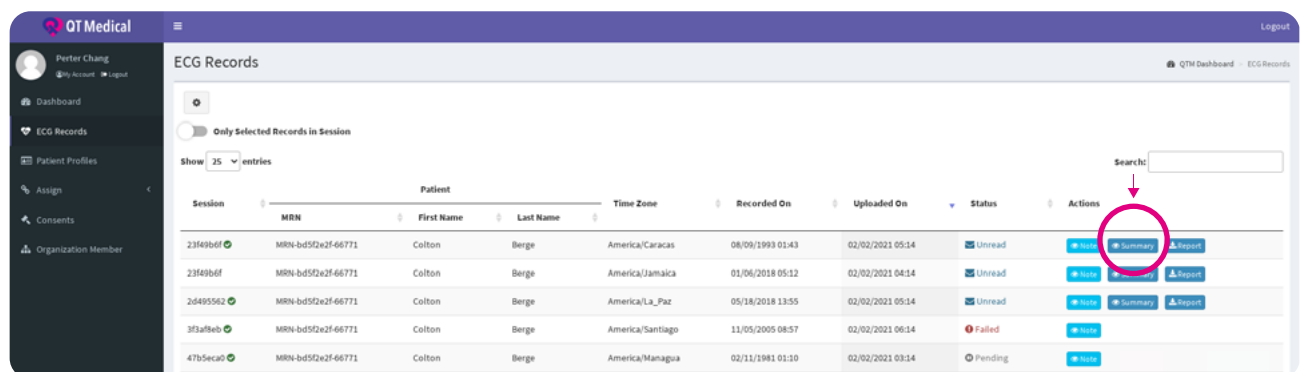


如果您要更改量測值參數，請點選 **numerical value**。

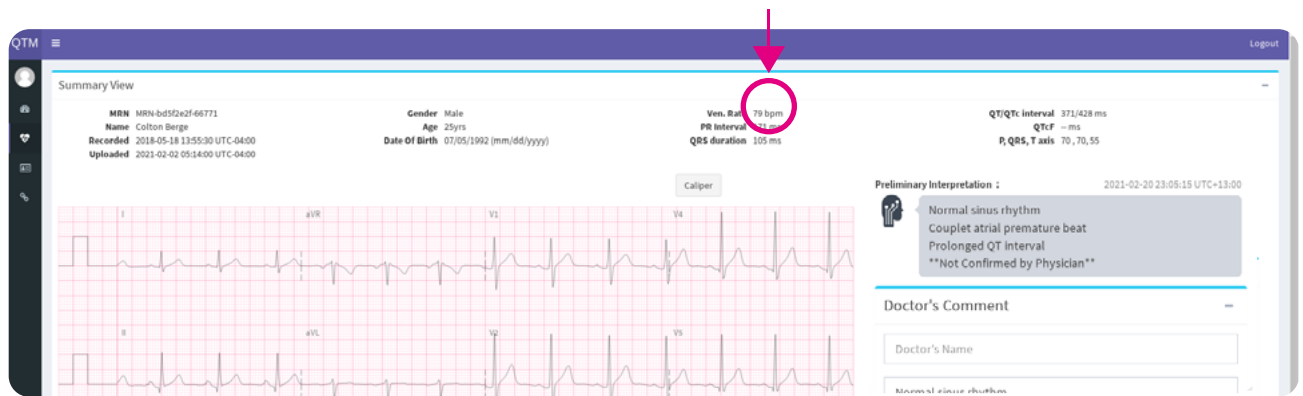

在可編輯欄位中調整設定。

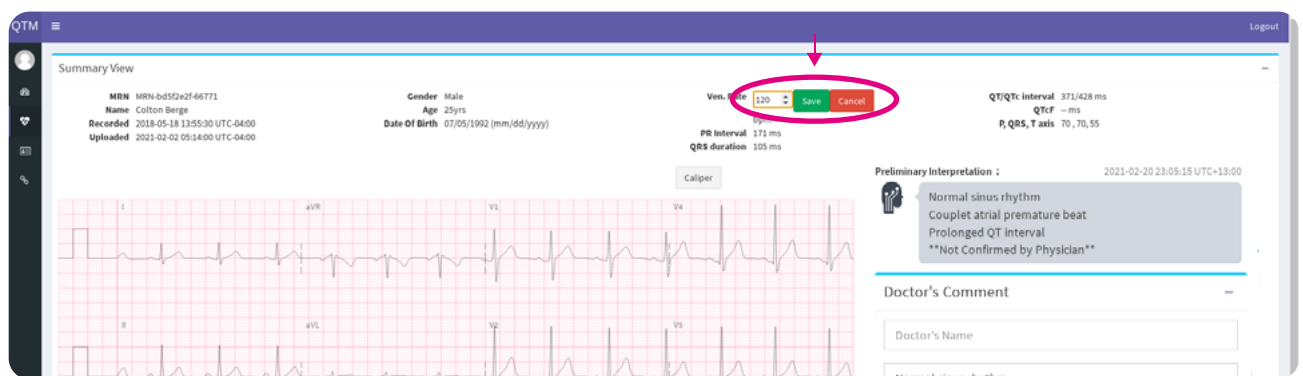

參數值在編輯後將變為粗體。

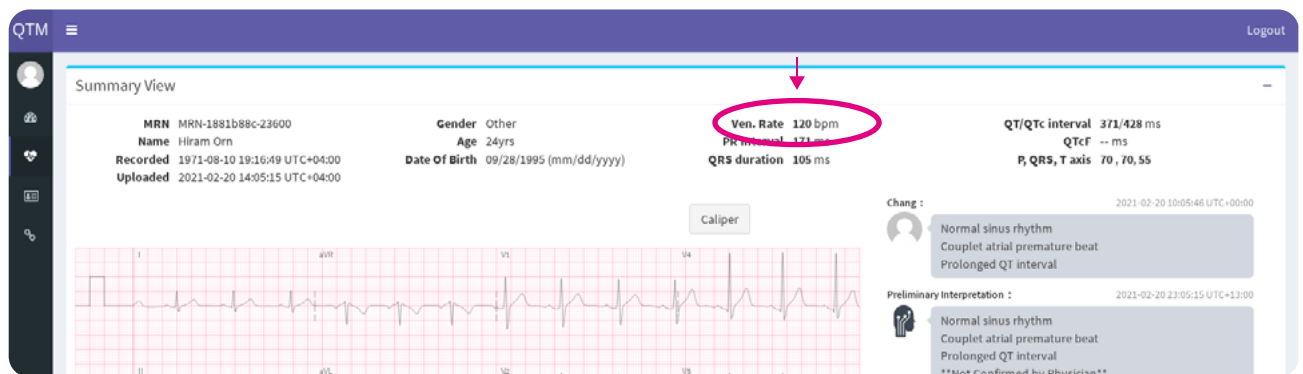

5.2 調整時間區隔（僅限 Physician Account 醫師帳號）

選擇 "Caliper"，會顯示可以移動的綠線與藍線。


The screenshot shows the QTM ECG interface. At the top, there's a 'Summary View' header. Below it, patient information is displayed: MRN 1881b88c-23600, Name Hiram Orr, Gender Other, Age 24yrs, Recorded 1971-08-10 19:16:49 UTC+04:00, Date Of Birth 09/28/1995 (mm/dd/yyyy), Uploaded 2021-02-20 14:05:15 UTC+04:00. Clinical data includes Ven. Rate 120 bpm, PR interval 171 ms, QRS duration 105 ms, QT/QTc interval 371/428 ms, QTcF -- ms, P, QRS, T axis 70, 70, 55. A 'Caliper' button is highlighted with a red circle. The ECG waveforms are displayed in a 12-lead format. On the right, there's a 'Chang' section with a date and time, a 'Preliminary Interpretation' section with a date and time, and a 'Doctor's Comment' section with a text area and a 'Submit' button.

您可以移動綠線和藍線，以測量心電圖記錄中任一部分的時間區段。

The screenshot shows the QTM ECG interface with the 'Caliper' tool active. The patient information is: MRN bd5f2e2f-66771, Name Colton Berge, Gender Male, Age 25yrs, Recorded 2018-05-18 13:55:30 UTC-04:00, Date Of Birth 07/05/1992 (mm/dd/yyyy), Uploaded 2021-02-02 05:14:00 UTC-04:00. Clinical data includes Ven. Rate 120 bpm, PR interval 171 ms, QRS duration 105 ms, QT/QTc interval 371/428 ms, QTcF -- ms, P, QRS, T axis 70, 70, 55. The 'Caliper' button is now checked. The ECG waveforms are displayed in a 12-lead format. On the right, there's a 'Chang' section with a date and time, a 'Preliminary Interpretation' section with a date and time, and a 'Doctor's Comment' section with a text area and a 'Submit' button. A red circle highlights the 'Caliper' button, and another red circle highlights the 'V1' lead in the bottom table.

Lead	I	II	III	aVR	aVL	aVF	V1	V2	V3	V4	V5	V6	Rhythm	ms
Diff.	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3000	ms

這段時間區段將被測量。

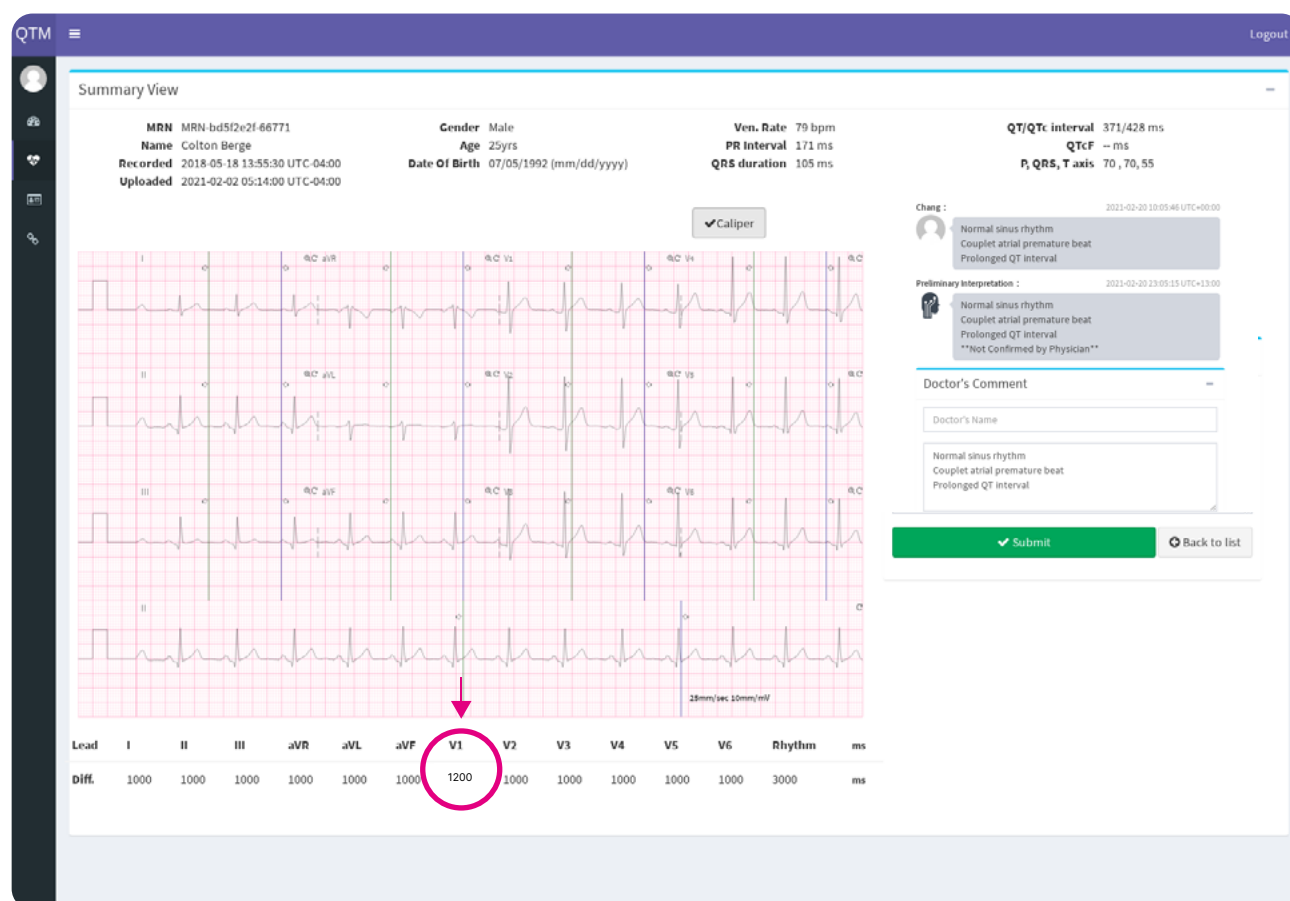

5.3 心電圖診斷 (僅限 Physician Account 醫師帳號)

5.3.1 初步輔助診斷會顯示在摘要瀏覽中。

The screenshot displays the 'Summary View' of an ECG report. At the top, patient information is shown: MRN (bd5f2e2f-66771), Name (Colton Berge), Gender (Male), Age (25yrs), Date Of Birth (07/05/1992), Ven. Rate (79 bpm), PR Interval (171 ms), QRS duration (105 ms), QT/QTc interval (371/428 ms), QTcF (ms), and P, QRS, T axis (70, 70, 55). The ECG traces are displayed in a grid format. A 'Caliper' tool is visible above the traces. On the right side, a 'Preliminary Interpretation' box is highlighted with a red border, containing the text: 'Normal sinus rhythm', 'Couplet atrial premature beat', 'Prolonged QT interval', and '**Not Confirmed by Physician**'. Below this, the 'Doctor's Comment' section is visible, with a text area containing the same interpretation text and a 'Submit' button.

5.3.2 醫師診斷

醫師可以在 **Doctor's Comment** 區塊寫下診斷與註解。

This screenshot shows the same ECG Summary View as the previous one, but with the 'Doctor's Comment' section highlighted by a red border. The 'Preliminary Interpretation' box remains visible above it. The 'Doctor's Comment' section includes a text area where the doctor can enter their diagnosis and notes, and a 'Submit' button at the bottom.

醫師診斷會顯示於摘要瀏覽中。

QTM

Logout

Summary View

MRN: 1881b88c-23600

Name: Hiram Orr

Recorded: 1971-08-10 19:16:49 UTC+04:00

Uploaded: 2021-02-20 14:05:15 UTC+04:00

Gender: Other

Age: 24yrs

Date Of Birth: 09/28/1995 (mm/dd/yyyy)

Ven. Rate: 120 bpm

PR Interval: 171 ms


QRS duration: 105 ms

QT/QTc interval: 371/428 ms

QTcF: -- ms

P, QRS, T axis: 70, 70, 55

Caliper

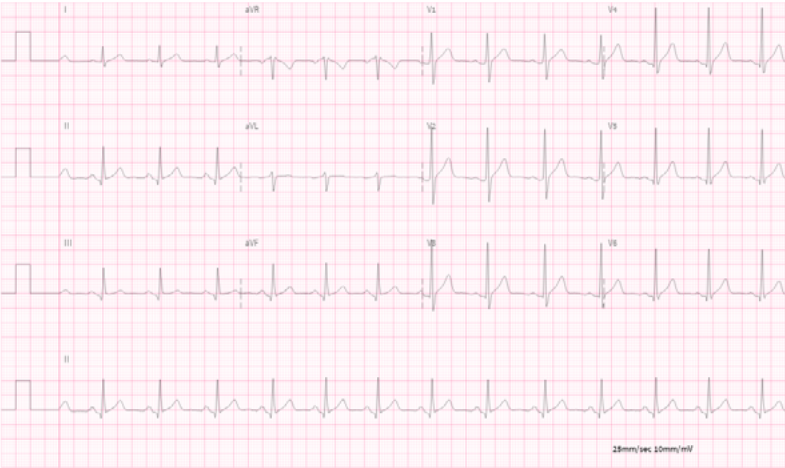

Chang : 2021-02-20 10:05:46 UTC+00:00

Normal sinus rhythm

Couplet atrial premature beat

Prolonged QT interval

Preliminary Interpretation : 2021-02-20 23:09:15 UTC+13:00

Normal sinus rhythm

Couplet atrial premature beat

Prolonged QT interval

Not Confirmed by Physician

Doctor's Comment

Doctor's Name

Normal sinus rhythm

Couplet atrial premature beat


Prolonged QT interval

Submit Back to list

6 病患管理


6.1 總覽

6.1.1 點選 **Patient profile**, 您可以看到所有上傳到後台的病患檔案。

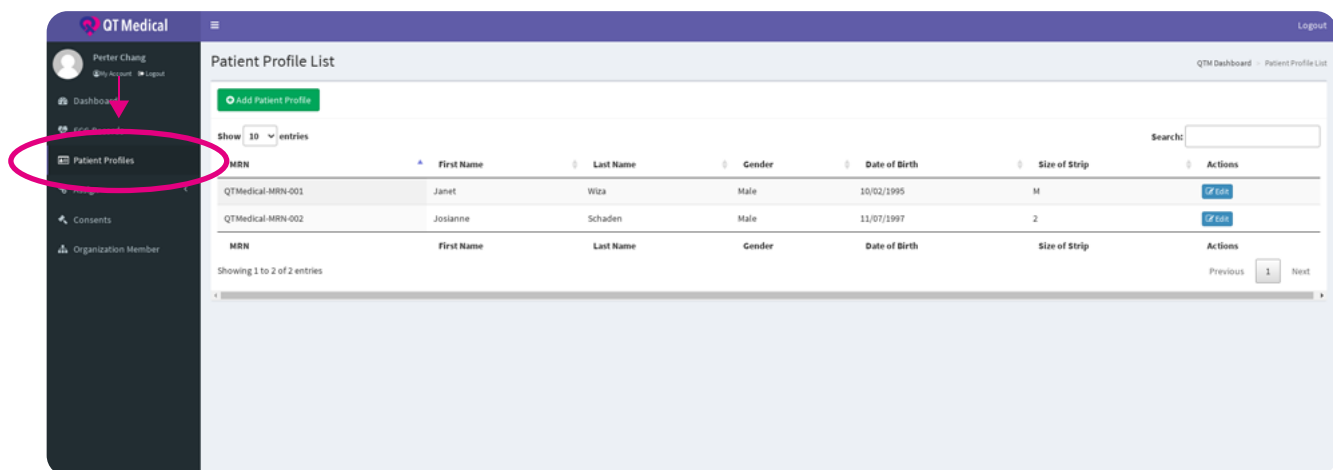

6.1.2. 新增病患

點選 **Add Patient Profile** 按鈕。

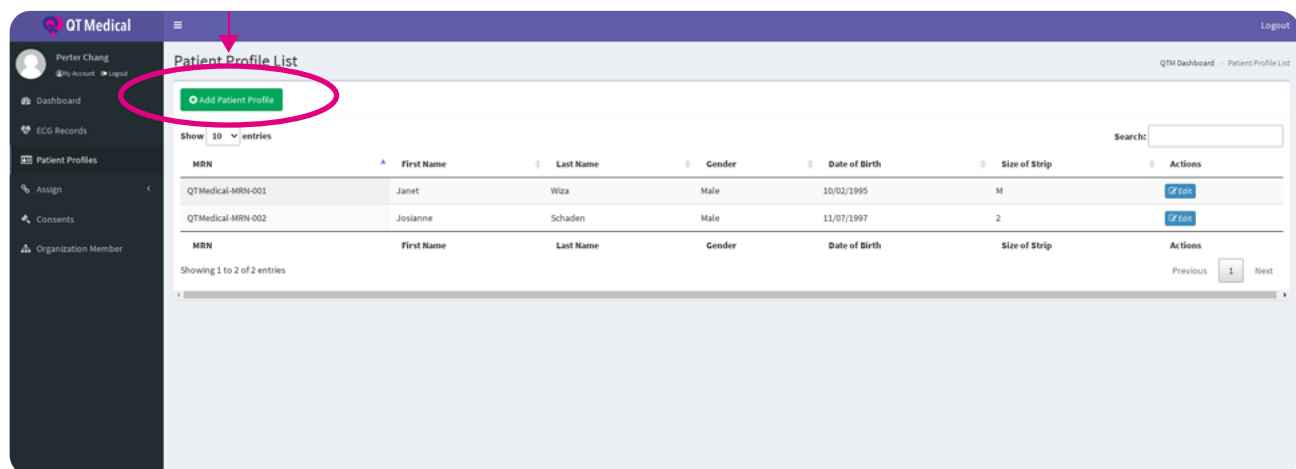

填寫病患資料並按下 **Create** 新增。

QT Medical

Perter Chang
My Account Logout

Dashboard
ECG Records
Patient Profiles
Assign
Consents
Organization Member

Create Patient Profile

QTM Dashboard Patient Profile List Create Patient Profile

* MRN
MRN

* First Name
First Name

* Last Name
Last Name

* Gender
Please choose your gender

* Date of Birthday
mm/dd/yyyy

* Size of Strip
Please choose your size

Create

病患檔案已建立。

QT Medical

Perter Chang
My Account Logout

Dashboard
ECG Records
Patient Profiles
Assign
Consents
Organization Member

Patient Profile List

QTM Dashboard Patient Profile List

+ Add Patient Profile

Show 10 entries

Search:


MRN	First Name	Last Name	Gender	Date of Birth	Size of Strip	Actions
QTMedical-MRN-001	Janet	Wiza	Male	10/02/1995	M	Create
QTMedical-MRN-002	Josianne	Schaeden	Male	11/07/1997	2	Create
QTMedical-MRN-003	Jimmy	Lu	Male	09/29/1990	XL	Create

Showing 1 to 3 of 3 entries


Previous 1 Next

6.1.3 編輯病患資料

點選右方的 **Edit** 按鈕開始編輯。

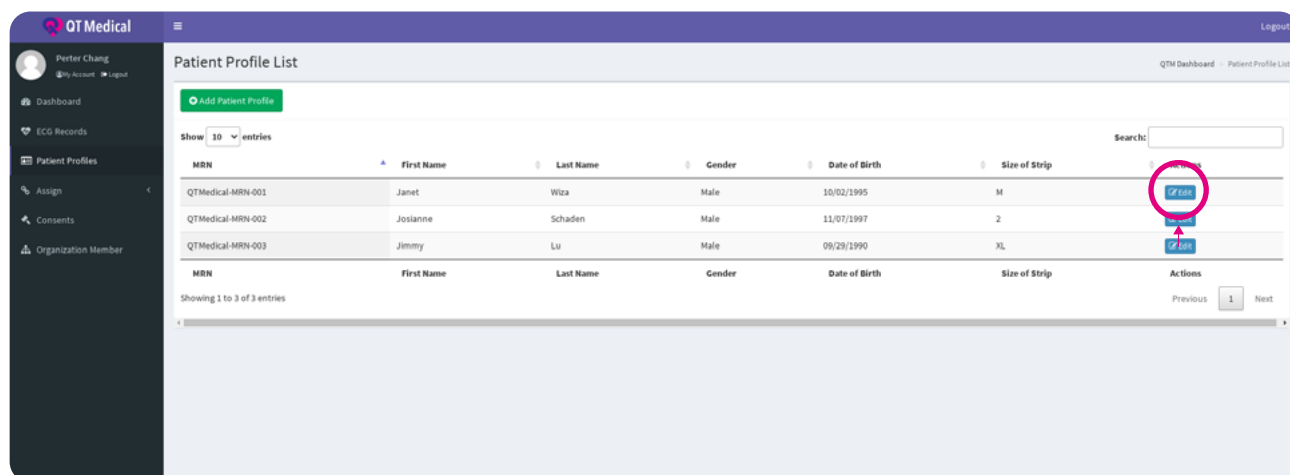


編輯後點選 **Update** 儲存更新後的資料。

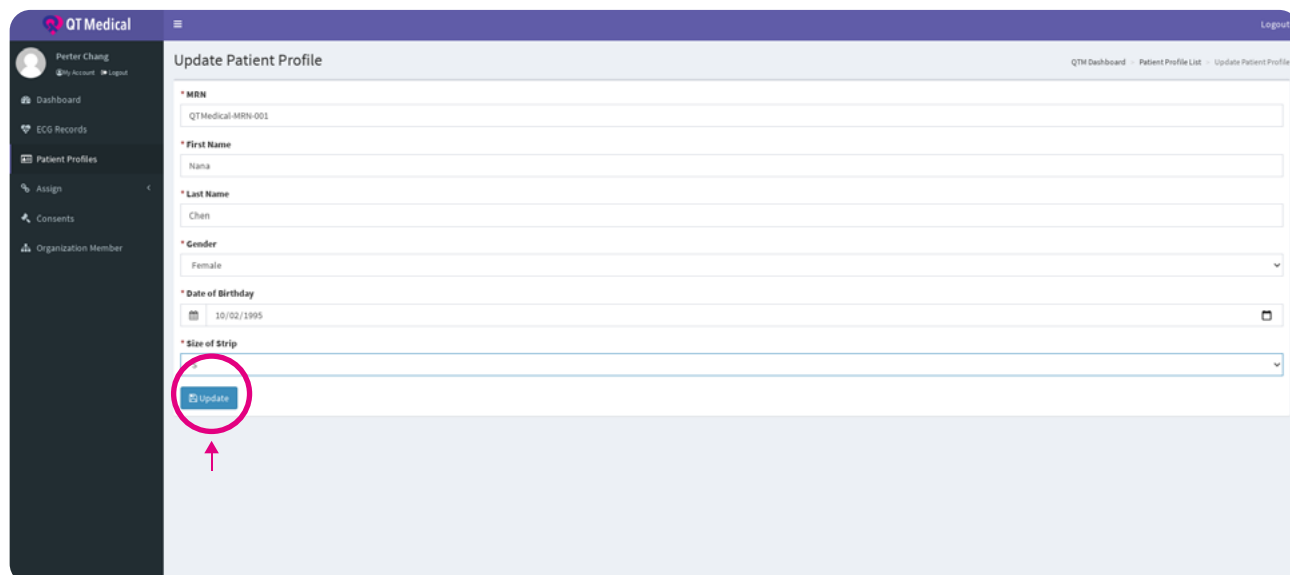

7. 分配心電圖

7.1 心電圖病患歸檔

點擊 **Assign** 選擇 **Assign ECG to Patient**，以選擇將心電圖分配指定病患檔案中。
您可檢視依照工作階段顯示的列表。

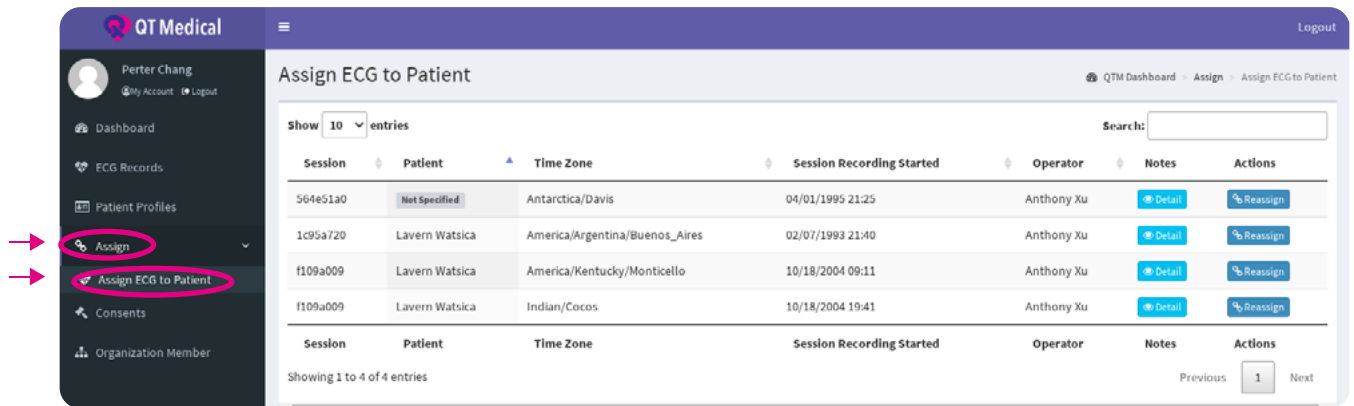

QT Medical

Assign ECG to Patient

QTM Dashboard > Assign > Assign ECG to Patient

Show 10 entries


Search:

Session	Patient	Time Zone	Session Recording Started	Operator	Notes	Actions
564e51a0	Not Specified	Antarctica/Davis	04/01/1995 21:25	Anthony Xu	Detail	Reassign
1c95a720	Lavern Watsica	America/Argentina/Buenos_Aires	02/07/1993 21:40	Anthony Xu	Detail	Reassign
f109a009	Lavern Watsica	America/Kentucky/Monticello	10/18/2004 09:11	Anthony Xu	Detail	Reassign
f109a009	Lavern Watsica	Indian/Cocos	10/18/2004 19:41	Anthony Xu	Detail	Reassign

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

在 Guest 訪客模式錄製的心電圖記錄將顯示為 Not Specified(未指定)，需要重新指定到正確的病患檔案。

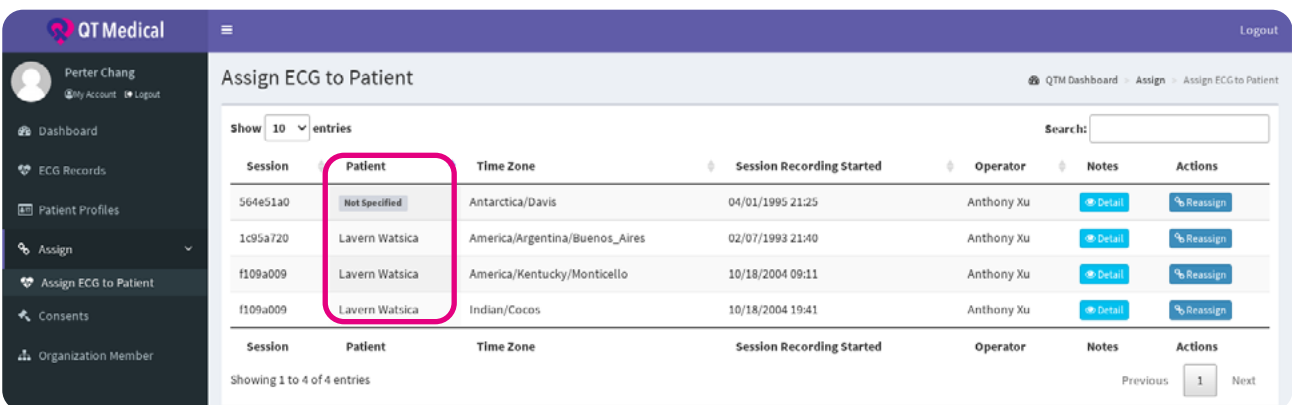

QT Medical

Assign ECG to Patient

QTM Dashboard > Assign > Assign ECG to Patient

Show 10 entries

Search:

Session	Patient	Time Zone	Session Recording Started	Operator	Notes	Actions
564e51a0	Not Specified	Antarctica/Davis	04/01/1995 21:25	Anthony Xu	Detail	Reassign
1c95a720	Lavern Watsica	America/Argentina/Buenos_Aires	02/07/1993 21:40	Anthony Xu	Detail	Reassign
f109a009	Lavern Watsica	America/Kentucky/Monticello	10/18/2004 09:11	Anthony Xu	Detail	Reassign
f109a009	Lavern Watsica	Indian/Cocos	10/18/2004 19:41	Anthony Xu	Detail	Reassign

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

點擊 **Reassign** 重新分配，然後從列表中選擇要歸檔的病患。
當分配成功，通知訊息會顯示在跳出視窗。

Assign ECG to Patient

Show 10 entries

Search:

Session	Patient	Time Zone	Session Recording Started	Operator	Notes	Actions
564e51a0	Not Specified	Antarctica/Davis	04/01/1995 21:25	Anthony Xu	Detail	Reassign
1c95a720	Lavern Watsica	America/Argentina/Buenos_Aires	02/07/1993 21:40	Anthony Xu	Detail	Reassign
f109a009	Lavern Watsica	America/Kentucky/Monticello	10/18/2004 09:11	Anthony Xu	Detail	Reassign
f109a009	Lavern Watsica	Indian/Cocos	10/18/2004 19:41	Anthony Xu	Detail	Reassign

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Patient List for Session ID: 564e51a0

Show 10 entries

Search:

MRN	First Name	Last Name	Actions
MRN-5a108746-71232	Lavern	Watsica	Select

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

而且，在點擊 **Detail** 時，您可以看到附註的詳細資料。

Assign ECG to Patient

Show 10 entries

Search:

Session	Patient	Time Zone	Session Recording Started	Operator	Notes	Actions
564e51a0	Not Specified	Antarctica/Davis	04/01/1995 21:25	Anthony Xu	Detail	Reassign
1c95a720	Lavern Watsica	America/Argentina/Buenos_Aires	02/07/1993 21:40	Anthony Xu	Detail	Reassign
f109a009	Lavern Watsica	America/Kentucky/Monticello	10/18/2004 09:11	Anthony Xu	Detail	Reassign
f109a009	Lavern Watsica	Indian/Cocos	10/18/2004 19:41	Anthony Xu	Detail	Reassign

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Notes for ECG Session ID: f109a009

ECG #0 Note

The patient moves during recording.

ECG #1 Note

This is the correct record.

客服資訊

如有客戶服務相關問題，請聯繫我們：



QT Medical

藥商地址：台北市中正區新生南路 1 段 148 號 9F

製造廠地址：新北市中和區建八路 2 號 14 樓之 8

TEL : (02)2395-7378

FAX : (02)2395-7379

service@qtmedical.com

線上 Line 客服：



www.qtmedical.com/zh-tw/

